


園児のお昼寝時間をもっと安全にするための午睡チェックツール

保育対策
補助金対象

※補助金の交付有無および補助額、募集要項は各地方自治体により異なります。

体動センサ
IBUKI ONE & 午睡チェックアプリ
IBUKI NAP

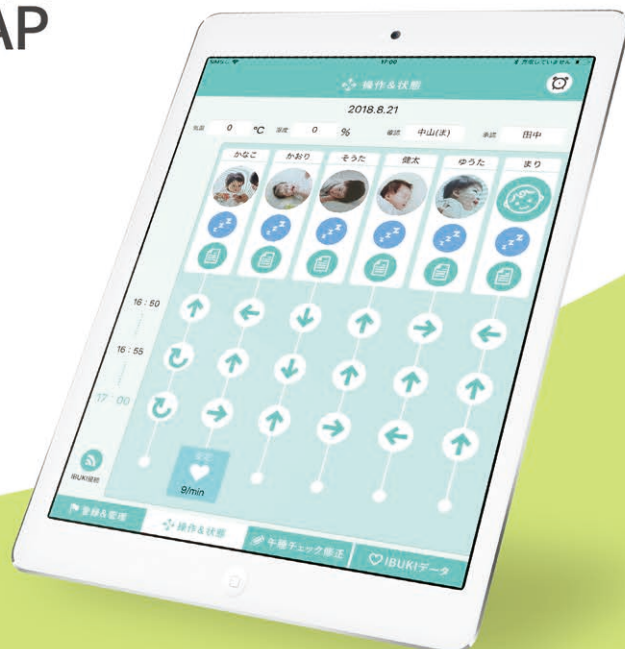

体動センサIBUKI ONEってなに？

- 1 体動センサIBUKI ONEは乳幼児の呼吸体動数をチェックし、睡眠状態を見守るセンサーです。保育士の心理的負担を軽減する補助的ツールです。
※チェックする呼吸体動数は睡眠を見守る目安です。
- 2 午睡チェック専用アプリIBUKI NAPと接続すると、保育士の業務負担も軽減できます。

保育対策総合支援事業費補助金

0～1歳の午睡中に死亡事故などが発生している状況を踏まえ、事故防止推進事業として、国および全国自治体が睡眠中の事故防止など保育の質の確保・向上のために必要な機器の導入を支援しています。IBUKIは本制度の対象製品として、全国での納品実績があります。
※補助金の交付有無および補助額、募集要項は各地方自治体により異なります。
※機器の導入により午睡中の保育士などによる見回りや配置基準を緩和するということではありません。

お布団の下に設置することで
睡眠をモニターできます。



午睡チェックアプリIBUKI NAP


IBUKI NAPの機能(1)

- 体動センサIBUKI ONEと連携して呼吸体動をアイコンで表示できます。
- 呼吸体動数をチェックしながら、寝姿勢を簡単にタップで入力できます。
- 午睡チェック表を簡単にPDF出力可能です。



IBUKI NAPの機能(2)

- iPadの横置きにも対応しています。
- 園児の写真を登録できます。
- 管理画面からユーザー情報や午睡チェック間隔などを簡単登録できます。
- 検温や乳幼児の状態を記入できます。
- 呼吸体動状態と午睡チェックのデータを、iPad本体はもちろん、iPadをネットにつなげればiCloud上にも保存可能です。
- 午睡チェック表の確認画面では、チェック間違いを修正可能です。
- 設定時間分の午睡チェック表を簡単に作成できます。

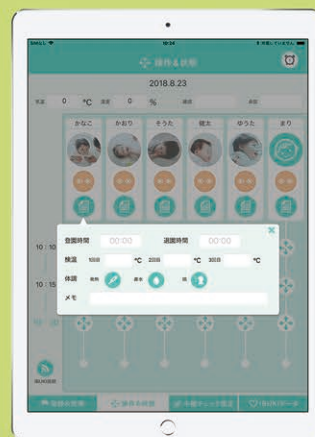

2018/8/21

施設名: A保育園 クラス名: ひまわり

温度: °C 湿度: %

時間	かなこ	かおり	そうた	健太	ゆうた	まり	検温	状態	呼吸	体動	備考
08:00											1400
08:05											1405
08:10											1410
08:15											1415
08:20											1420
08:25											1425
08:30											1430
08:35											1435
08:40											1440
08:45											1445
08:50											1450
08:55											1455
09:00											1500
09:05											1505
09:10											1510
09:15											1515
09:20											1520
09:25											1525
09:30											1530
09:35											1535
09:40											1540
09:45											1545
09:50											1550
09:55											1555
10:00											1600
10:05											1605
10:10			→	→	↑	↑	↑	↑	↑	↑	1610
10:15		↑	↑	→	↑	↑	↑	↑	↑	↑	1615
10:20		↑	↑	→	↑	↑	↑	↑	↑	↑	1620
10:25		→	→	→	↑	↑	↑	↑	↑	↑	1625
10:30		→	↑	↑	→	↑	↑	↑	↑	↑	1630
10:35		↑	↑	↑	↑	→	↑	↑	↑	↑	1635
10:40		↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	1640
10:45		↑	→	→	→	↑	↑	↑	↑	↑	1645
10:50		→	↑	→	↑	↑	↑	↑	↑	↑	1650
10:55		↑	→	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	1655
11:00		↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	1700
11:05		↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	1705
11:10		↑	↑	→	↑	↑	↑	↑	↑	↑	1710
11:15		↑	↑	→	→	↑	↑	↑	↑	↑	1715

上記は機能の一部です。

体動センサ IBUKI ONE



体動センサIBUKI ONEの機能

- エアー式センサーによって呼吸体動数をチェックすることができます。
- 体動センサIBUKI ONEは単体でもご利用いただけます。
- Bluetooth接続を利用しているため、ネット環境がない場所でもアプリと連携できます。

体動センサIBUKI ONEの製品仕様

検出機能	睡眠中の体動、体動から推測した呼吸数、離床（一般モード） ※ただし、医療行為に供しない
アラート機能	特定の異常状態を検出したときに外部へ注意を発報
センサー	専用センサーマット センサーマット内のエアパット（中空薄型特殊マット）とセンサー本体をシリコンチューブで接続
入力電圧	5V DC
入力電流	200mA
外形	センサー本体：80(W) 127(H) 30(D) mm 取付金具付き センサーマット：800(W) 400(H) 10(D) mm
重量	センサー本体：157g センサーマット：約1100g
外部I/O	Bluetooth low energy（技適取得済）
検出開始時間	着床後約20～30秒で計測開始
設置場所	センサーマットを布団やマットレスの上または下側に設置
届出番号	一般医療機器製造販売届出番号：13B1X10220000014

Ranpak

製品の梱包材には、FSC（森林管理業議会）の認証を得ているRanpak社の無漂白クラフト紙を使用しています。

選べる2種の契約プラン

買取プラン

最低購入人数：1名

メーカー保証：**1年**

タブレット1台、体動センサIBUKI ONE 1台より
お買い求めいただけます。

NEW
Plan

月額レンタルプラン

最低契約人数：3名

メーカー保証：**契約期間内**

最低3年間のご契約となります。
4年目以降は2年ごとの更新となります。

or

月額レンタル費用 イメージ



3名の場合



6名の場合



12名の場合

初期費用

100,000円～

190,000円～

370,000円～

月額費用

9,600円～
(1名あたり 3,200円～)

16,200円～
(1名あたり 2,700円～)

32,400円～
(1名あたり 2,700円～)

- ・ 契約期間中は、センサー / マットの故障に対しメーカー無償交換サポートが付きます。
(故意・過失によるもの、タブレットは除く)
- ・ 本契約は最低3年間の契約となり、4年目以降は2年ごとの更新となります。
(途中解約の場合も3年分の費用を頂戴いたします)
- ・ 本契約は、IBUKI ONE 3セット + 専用タブレット 1台が最低契約数となります。
- ・ 契約途中でもIBUKI ONEの増設は可能です。

●注意事項

- ・ 本製品の使用中に、乳幼児に異常が見られたときには直ちに救急車を呼び、呼吸回復などの処置をとってください。
- ・ 取扱説明書に従った正常な使用で、不具合が発生したときには無償交換いたします。ただし、お買い上げ後1年以内であることが条件になります。

お問い合わせ先

ご導入やご質問は下記までご連絡ください。



SOLUTION SUPPLIER
PALTEK

【総販売元】株式会社PALTEK

〒222-0033 横浜市港北区新横浜2-3-12新横浜スクエアビル6F

URL: <https://www.paltek.co.jp/solution/ibukione/>

SAソリューション ビジネス ユニット

✉ LDS-support@paltek.co.jp

☎ 045-477-2003

